

BRUGERVEJLEDNING

DUAL TULIP

HR-Chitosan hæmostatisk tamponade til gynækologi



Varemærke	DUAL TULIP V
Artikelnummer	EV DTV0220200P
Størrelse	Tamponade Ø 2,0 x 4,5 cm
Emballage	10 stk./pakke
Producent	Endovision
Distributør i Danmark	Apgar A/S

Til sundhedspersonale

1 Indikation

DUAL TULIP bruges til at stoppe blødning efter konisation, biopsi eller lignende gynækologiske indgreb. Produktet placeres med fysisk kompression direkte på blødningsstedet.

DUAL TULIP kan også anvendes til forbigående behandling under operation, postoperativt samt ved kirurgiske sår.

2 Klargøring inden brug


1. Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Kontrollér emballagen for skader inden brug.
2. Den ansvarlige læge skal være fuldt fortrolig med produktets kliniske indikationer og kontraindikationer.
3. Patienten skal modtage brugsanvisning og forholdsregler fra den behandlende læge inden brug af produktet.
4. Åbn emballagen, og kontrollér, at tråden sidder ordentligt fast, inden DUAL TULIP appliceres.

3 Brugsanvisning

Efter konisation, biopsi eller lignende indgreb: lokalisér blødningsstedet, og applicér DUAL TULIP direkte på det.

Sådan applicerer du DUAL TULIP

1. Hæld ca. 50–80 ml saltvandsopløsning i en beholder eller et glasbæger, og dyp derefter DUAL TULIP i saltvandsopløsningen i et par sekunder.
2. Indfør spekulum, før DUAL TULIP ind i vaginalåbningen, og applicér det forsigtigt på det blødende område med let tryk.
3. Sørg for, at DUAL TULIP er korrekt placeret på blødningsstedet, og kontrollér, at tråden stikker ca. 4–5 cm ud af vaginalåbningen.

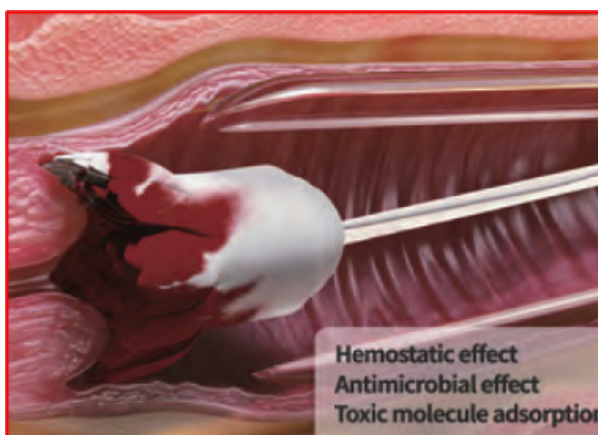

Hæmostatisk, antimikrobiel og antiinflammatorisk

Sådan fjerner du DUAL TULIP

Træk langsomt i tråden efter 4–8 timer for at fjerne DUAL TULIP fra det behandlede område.

- Ved kraftig blødning skal produktet udskiftes af hensyn til patientens velbefindende.
- Ved risiko for yderligere blødning skal et nyt produkt anvendes efter samme anvisning.

Hvis der opstår komplikationer

- Hvis blødningen fortsætter uden for vagina under brug af DUAL TULIP, skal du kontakte den behandlende læge eller nærmeste hospital.
- Hvis hele produktet ikke følger med ud sammen med den fastsiddende tråd, skal du kontakte den behandlende læge eller nærmeste hospital.

4 Advarsler

VIGTIGT

- Dette produkt er ikke-absorberbart og må derfor ikke efterlades i kroppen.
- Læs instruktionerne omhyggeligt inden brug, og anvend DUAL TULIP i overensstemmelse med denne brugsanvisning.

5 Forholdsregler

1. Produktet er sterilt og må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller er beskadiget.
2. Kun til engangsbrug. Må ikke resteriliseres eller genbruges.
3. Anvend ikke produkter, hvis udløbsdato er overskredet.
4. Hvis blødningen fortsætter uden for skeden under brug af DUAL TULIP, skal du kontakte den behandlende læge eller nærmeste hospital.
5. Hvis hele produktet ikke følger med ud sammen med den fastsiddende tråd, skal du kontakte den behandlende læge eller nærmeste hospital.

6 Opbevaring og bortskaffelse efter brug

1. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod direkte sollys.
2. Kun til engangsbrug. Må ikke resteriliseres eller genbruges.
3. Produktet er ikke-absorberbart og skal fjernes helt fra applikationsstedet.
4. Efter brug bortskaffes produktet som almindeligt restaffald.

7 Kontaktinformation

Har du spørgsmål om DUAL TULIP eller andre produkter fra Apgar, er du velkommen til at kontakte os:

Apgar A/S

Ringager 24
2605 Brøndby

Kontaktoplysninger

Telefon: 43 43 66 15
E-mail: info@apgar.dk
www.apgar.dk

Åbningstider: Man–tors 08:00–16:00, fredag 08:00–15:30

8 Producent og EU-repræsentant

Oplysninger iht. IFU-krav om producent og EU-repræsentant for DUAL TULIP:



ENDOVISION Co., Ltd.
66-26, Dongnae-ro, Dong-gu, Daegu, Rep. of Korea (41061)
T. +82.53.751.1955 F. +82.53.751.1964
E-mail: info@endovision.co.kr / www.endovision.co.kr



JaviTech e.K.
Sachsenhausener Straße 16, 65824 Schwalbach am Taunus
Germany T. +49 6196 4021549 Email: info@javitech.de

Certificeringer



ISO 13485:2016 – certificeret kvalitetsstyringssystem for medicinsk udstyr · CE 0068 – CE-mærkning med det bemyndigede organs identifikationsnummer · GMP – fremstillet i henhold til god fremstillingspraksis